



ACCESSORI ACCESSORIES

ACCESSORI DIRETTI - BONDABLE ACCESSORIES

Gli accessori sono realizzati in acciaio medicale. Il Cleat diretto ha una base mesh anatomica. I Bottoni diretti, realizzati in MIM, hanno una basetta mesh  e sono disponibili in diverse forme e con occhiello.

Si applicano sul lato vestibolare o linguale del dente utilizzando un qualsiasi adesivo ortodontico. Ganci e Stop, realizzati in MIM, servono per creare un punto di ancoraggio o di stop sull'arco. I Ganci aperti sono universali, mentre quelli chiusi sono disponibili per slot 0,018" e 0,022".

Our bondable accessories are made of medical-grade steel. The bondable Cleat has a mesh base for excellent retention. The Buttons also have a mesh base  and are available in different shapes and with eyelet.

They can be bonded to the vestibular or lingual side of the tooth using orthodontic adhesive. MIM-made Hooks and Stops are designed to create an anchorage or stop point on the arch. Open hooks are universal, while closed ones are available for 0.018" and 0.022" slots.



REF: N30-M022 B

BOTTONE DIRETTO OVALE PIATTO

BONDABLE OVAL BUTTON / FLAT



REF: N30-M021 B

BOTTONE DIRETTO OVALE CURVO

BONDABLE OVAL BUTTON / CURVED



REF: N30-M031 B

BOTTONE DIRETTO TONDO PIATTO

BONDABLE ROUND BUTTON / FLAT



REF: N30-M032 B

BOTTONE DIRETTO TONDO CURVO

BONDABLE ROUND BUTTON / CURVED



REF: N30-G031 B

BOTTONE DIRETTO CON OCCHIELLO

BONDABLE EYELET

CONFEZIONE DA 10 PZ. ~ *PACKAGING OF 10 PCS*



REF: N30-CLEAT B

CLEAT DIRETTO

CLEAT



REF: G30-ZZCUDC (SLOT 0.018")

REF: G30-ZZCUVC (SLOT 0.022")

GANCIO A PALLA CURVO CHIUSO

SLIDING CURVED HOOK



REF: G30-ZZAADC (SLOT 0.018")

REF: G30-ZZAADC (SLOT 0.022")

GANCIO A PALLA DRITTO CHIUSO

SLIDING STRAIGHT HOOK



REF: G30-ZZAADS

GANCIO CON PALLA

CRIMPABLE BALL HOOK



REF: G30-ZZAADL

GANCIO SENZA PALLA

CRIMPABLE HOOK




REF: G30-ZZAAD1

STOP DA CRIMPARE

CRIMPABLE STOP

CONFEZIONE DA 10 PZ. ~ *PACKAGING OF 10 PCS*

SPRING ACTIVATOR

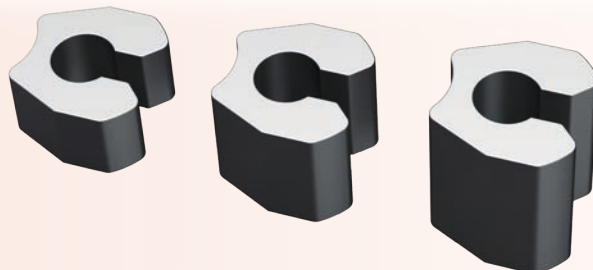

1,0 mm

1,5 mm

2 mm

SET

CONFEZIONE DA 30 PZ.

*PACKAGING OF 30 PCS***REF**

G30-ACKIT

RICAMBI/ REFILLS

1,0 MM

1,5 MM

2,0 MM

REF

G30-01A

G30-15A

G30-20A

CONFEZIONE DA 20 PZ.

PACKAGING OF 20 PCS

ACTIVA è un prodotto che permette la riattivazione delle molle aperte in modo semplice, pratico ed estremamente rapido. Con **ACTIVA**, una volta stabilito lo spazio necessario per la riattivazione della molla, è sufficiente comprimerla verso uno dei due lati ed inserire l' **ACTIVA** dello spessore desiderato. In questo modo la molla, nuovamente compressa, riattiva la sua funzione di spinta.

VANTAGGI

– Azione collaborativa nelle meccaniche di scivolamento: a differenza dei comuni dispositivi da crimpare, Activa si chiude intorno al filo senza toccarlo; pertanto, il suo utilizzo non compromette le meccaniche di scivolamento permettendo una libera e completa azione di

ACTIVA is a product that allows the reactivation of the open springs in a simple, practical, and extremely rapid way. With **ACTIVA**, once the space required for spring reactivation has been quantified, it is only a matter of compressing it towards one of the two sides and insert the **ACTIVA** of the desired thickness. In this way, the spring, compressed again, reactivates its thrust function.

ADVANTAGES

– Cooperation with the sliding mechanics: unlike the common crimping devices, Activa is not crimped onto the wire but around it, allowing the wire to move freely without compromising the sliding.

– Flexibility: selection of the needed compression level thanks to three available sizes. Activa fits on any

espansione della molla.

– Flessibilità di utilizzo: scelta del livello di compressione della molla desiderato grazie alle tre misure disponibili. Activa è adatto per ogni misura di arco e può essere inserito in qualsiasi momento del trattamento. Aggiungendo altri Activa, inoltre, è possibile aumentare progressivamente l'attivazione della molla nel corso del trattamento.

– Risparmio nell'uso di materiale: mantenimento della stessa molla precedentemente utilizzata.

– Riduzione del tempo alla poltrona: operazioni preliminari per la sostituzione della molla non più necessarie.

UTILIZZO DI ACTIVA

Step 1:

Selezionare la misura di ACTIVA desiderata;

Step 2:

Prendere ACTIVA con un qualsiasi strumento. Con un direzionatore comprimere la molla da uno dei due lati;

Step 3:

Inserire ACTIVA sulla parte di arco scoperto dalla molla e crimpare dolcemente. Quindi lasciare la molla.



size archwire and can be used anytime during treatment. It is also possible to increase the activation of the spring progressively by adding additional sizes of ACTIVA.

– Saving materials: no need to change the existing spring.

–Reduced chair time: spring replacements are no longer needed, which results in less chair time.

USE OF ACTIVA

Step 1:

Choose the correct size of ACTIVA is needed;

Step 2:

Grasp ACTIVA using any plier.

With an elastic ligature director compress the spring to one side;


Step 3:

Insert ACTIVA on the archwire and crimp it gently. Release the spring.

Step 1




Step 2

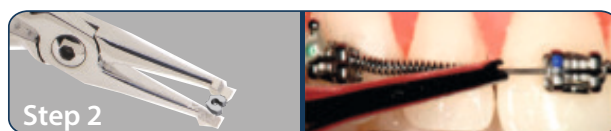

Step 3



OVERBITE CORRECTOR

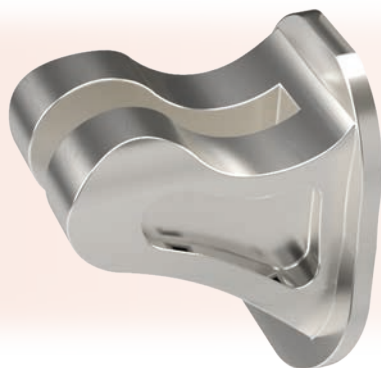

SET

CONFEZIONE DA 10 PZ.

PACKAGING OF 10 PCS

REF

N30-BT2B



Access the literature here

BT2 è la chiave per la correzione rapida del morso profondo (overbite). La sua curvatura brevettata riduce l'iperattività muscolare, atteggiamenti muscolari viziati (parafunzioni), e consentire la guida anteriore degli incisivi inferiori per l'apertura del morso prevenendo possibili interferenze.

BT2 non rilascia sostanze tossiche come gli analoghi prodotti in composito, ha una innovativa scanalatura verticale che aiuta sia nel posizionamento sia, soprattutto, nel debonding in quanto, se compressa con uno strumento, collassa e ne facilita il distacco.

BT2 consente una fisiologica eruzione di molari

BT2 is the key for rapid correction of severe skeletal and deep overbites. Its patented curvature reduces muscle hyperactivity and parafunction, permits anterior guidance of the lower incisors and prevents anterior interferences during forward grinding.

BT2 is wear-resistant, has a new and unique vertical groove to help placement, and facilitates debonding as it is simply collapsable.

BT2 allows a physiological eruption of molars and premolars without the effects of molar intrusion. Its wide and anatomical mesh base ensures a high resistance to debonding, frequent in this type of device due to interference in the occlusion.

BT2 is made of stainless steel that avoids the

e premolari senza gli effetti dell'intrusione dei molari. La sua ampia ed anatomica base mesh assicura un'elevata resistenza al distacco, frequente in questo tipo di dispositivi a causa delle interferenze nell'occlusione delle arcate.

La realizzazione in metallo, oltre ad evitare l'ingestione di sostanze tossiche, consente di avere un prodotto di immediato utilizzo, che riduce il tempo alla poltrona e permette la soluzione di over bite profondi in 4-6 mesi sia in bambini che adulti.

UTILIZZO DI BT2:

1. Per una adesione ottimale sul lato linguale, con una fresa rimuovere la pellicola dello smalto e proseguire con l'uso di pomice, mordenzante ecc. (Fig. 1). Al paziente viene chiesto di reclinare la testa indietro, in modo che il palato sia il più perpendicolare possibile al pavimento.
2. Posizionare la base del BT2 in modo da formare un angolo di circa 75° rispetto al tweezer a forma di J (Fig.2) con la curvatura più grande della base verso il bordo incisale e l'estremità appuntita verso il lato gengivale. (Fig.3, 4).
3. Utilizzare una sonda parodontale da inserire nello slot del BT2 per un posizionamento più preciso (Fig. 5) mentre la pressione del dito può aiutare inizialmente per adattare BT2 alla curvatura palatale degli incisivi (Fig. 6).
4. Verificare con la carta per articolazione la regolazione occlusale di BT2 e se necessario modificarla utilizzando una fresa abrasiva (Fig. 7,8).

ingestion of toxic substances, allows having a product of immediate use, reduces the chairside time, and leads to solve deep overbites in 4-6 months in both children and adults.

USE OF BT2:

1. *Green stone pellicle layer removal over enamel secures palatal bonding, followed by pumice, etc etc. (Fig. 1). Patient is asked to position their head up and back, for palate to be as perpendicular to floor as possible.*
2. *Position the base of the BT2 at about 75° angle to the J-shape of the bracket holder (Fig. 2) with larger base curvature to the incisal edge), and tapered end of bonding pad toward the gingival (Figs. 3, 4).*
3. *Ideally use the Periodontal Probe or the thicker neck of Hollenback instrument in the BT2 split opening to seat BT2 (Fig. 5) finger pressure may also be used to initially adapt BT2 to palatal curvature of incisors (Fig. 6).*
4. *Use articulating paper for BT2 occlusal adjustment with green stone for balance, if required (Figs. 7,8).*



Fig.1

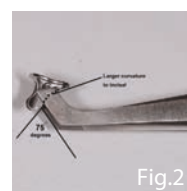


Fig.2

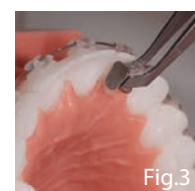


Fig.3



Fig.4



Fig.5

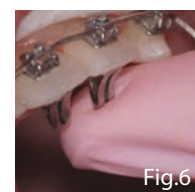


Fig.6



Fig.7



Fig.8

OPEN BITE CORRECTOR



SET

CONFEZIONE DA 12 PZ.

PACKAGING OF 12 PCS

REF

N30-TS2B



Access the literature here

TS2 è l'ideale per la correzione rapida (4-6 mesi) del morso aperto.

Principali caratteristiche

- Le 9 protrusioni prevengono la spinta della lingua sui denti anteriori (TS2 non taglia la lingua, i guanti dell'operatore o la pelle);
- Basetta con una retina da 80 mesh per una maggiore resistenza ritentiva;
- Sei sottosquadri da utilizzare con elastici per morso crociato, nel trattamento del morso aperto laterale che generalmente richiede l'espansione mascellare;
- Inibitore per la lingua dalle dimensioni molto contenute per una buona igiene orale.

TS2 is a new improved device for the Rapid (4-6 months) Open Bite Correction.

Main features

- *Nine rounded reminder protrusions prevents tongue thrusting (TS2 do not cut tongue, operator's glove or skin);*
- *80-gauge mesh bonding pad for increased shear bond strength;*
- *Six Undercuts for cross bite elastics in lateral open bite treatment that commonly require maxillary expansion;*
- *Very small tongue inhibitor for good oral hygiene.*

Indicazioni di utilizzo

- Chiusura rapida del morso aperto anteriore e laterale.
- Prevenzione di un posizionamento viziato latero-anteriore della lingua.
- Nel morso aperto laterale (Fig. 2A, 2B), ingaggiando su premolari e molari gli elastici da 1/4", 6oz. per crossbite.

Quando utilizzarlo

- Sia in pazienti in crescita sia in adulti, con l'utilizzo di ortodonzia fissa;
- Successivamente al bonding dei brackets.

Come funziona

- Come nel riflesso automatico al caldo, la lingua, in contatto con le protrusioni, si ritrae da una posizione viziata grazie al meccanismo di risposta alla condizione negativa (Fig. 3). Tali protrusioni non sono taglienti né per la lingua, né per i guanti o la pelle dell'operatore.

Dove posizzionarli

- Sui superiori e sugli inferiori da 3-3 sempre dal lato linguale.
- Posizionare appena sotto il centro della corona per consentire la chiusura completa del morso (Fig.4).
- Su premolari e molari per il morso aperto laterale.

**Why to use TS2**

- *Rapid Anterior and Lateral Open Bite Closure.*
- *Prevents anterior-lateral tongue positioning.*
- *In lateral open bites (Fig. 2A, 2B), undercuts are useful additionally for 1/4", 6oz heavy crossbite elastics at premolars, molars.*

When to place

- *In early and adult treatments with orthodontic brackets.*
- *At the second appointment after brackets have been placed.*

How TS2 works

- *Tongue retracts from forward positioning using a negative conditioning response, similar to a hot-stove reflex of the tongue (Fig. 3). TS2s are reminders and do not cut tongue, or operator's gloves or skin.*

Where to place

- *Palatal of upper anteriors 3 to 3 and Lingual of lower anteriors 3 to 3, bonded just below the center of the crown to permit open bite closure (Fig.4).*
- *Bonded to the premolars and molars for lateral open bites.*

