





# ADESIVI ADHESIVES

## MINI MOLD



**MINI MOLD** è uno strumento utile e semplice da utilizzare, ideale per creare direttamente sul dente attachment in composito di forme differenti in relazione alle specifiche esigenze. Mini Mold è composto da capsule monouso in lattice di diverse forme, un manico per posizionarle e relative istruzioni d'uso. Se ne consiglia l'impiego insieme al composito FC-BOND-008.

***MINI MOLD** is a valuable and easy-to-use product. It is ideal for creating composite attachments of different forms directly on the tooth. Mini Mold set contains all forms, one holder for the direct application, and a step-by-step instructions sheet. We recommend using our FC-BOND-008 adhesive.*

### SET

27 capsule, 3 per tipologia  
+ 1 manico + istruzioni d'uso

### SET

27 capsules, 3 of each style  
+ 1 handle + IFU

### REF

FC-MMKIT

**RICAMBI ~ REFILLS**
**CUNEO DI RIALZO**

Bite linguale per gli incisivi superiori, per il rialzo del morso. Disponibile nella misura piccola (3mm) e grande (5mm).



large: **REF:** FC-MM01L  
small: **REF:** FC-MM01S

**BITE-RAMP**

To create a bite opening ramp on the lingual of the up anterior theet. Available in small (3mm) or large size (5mm).

**RETAINER**

Ancoraggio di archi o fili per la creazione di retainer linguali. Disponibili nella misura piccola e grande.



large: **REF:** FC-MM02L  
small: **REF:** FC-MM02S

**WIRE BONDER**

Arch and wire anchorage to make lingual retainers. Available in small or large size.

**BOTTONE**

Per creare facilmente e rapidamente bottoni.



**REF:** FC-MM03

**BUTTON**

To create easily and quickly low profile buttons.

**CUNEO**

Per la creazione di rilievi che evitano la suzione del pollice o la spinta della lingua.



**REF:** FC-MM04

**HABIT-CONTROL**

To create relief that ends thumb sucking or tongue thursting.

**BRACKET**

Per la creazione di mini attacchi per semplici movimenti dentali.



**REF:** FC-MM05

**BRACKET**

To make small edgewise brackets for simple teeth movements.

**TUBO**

Per la creazione di tubi temporanei.




**REF:** FC-MM06

**TUBE**

To create temporary tubes.

**CUNEO POSTERIORE**

Per l'apertura del morso dai settori posteriori.

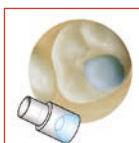

**REF:** FC-MM07

**POSTERIOR MOLAR PAD**

Designed to open the bite from the posterior teeth.

**CONFEZIONE ~ PACKAGING**

10 capsule +1 manico +istruzioni d'uso      10 capsules + 1 handle +IFU

**SEMPLICE TECNICA IN 2 FASI**

FASE UNO ~ Scegliere la capsula Mini- Mold dalla forma desiderata tra le 9 disponibili e riempirla di composito fotopolimerizzabile.

FASE DUE ~ Posizionare la capsula sul dente e fotopolimerizzare per almeno 15-20 secondi. Rimuovere la capsula e continuare la polimerizzazione per altri 20 sec.

***SIMPLE TECHNIQUE IN TWO STEPS***

*STEP ONE ~ Choose the capsule between the 9 availables and fill it the light cure composite.*

*STEP TWO ~ Position the capsule on the tooth and polymerize for 15-20 seconds. Take off the capsule and go on with the polymerization for 20 seconds more.*



FASE UNO - *STEP ONE*



FASE DUE - *STEP TWO*

## BLUE-BAND

ADESIVO PER BANDE - *LIGHT CURE BAND CEMENT*



Il cemento predosato **Blue-Band** ha elevate proprietà elastiche e non ha bisogno di essere premiscelato. Consente un esatto dosaggio della quantità necessaria e può essere applicato direttamente sulla banda.

La facilità di attivazione del materiale permette di accorciare i tempi di bandaggio.

La quantità di cemento in eccesso è di facile rimozione. La formula di base di questo cemento conferisce una maggiore adesione rispetto ai convenzionali vetro ionomerici e fosfati di zinco. Il cemento predosato rilascia fluoro riducendo la possibilità di decalcificazione. Di colore blu per una facile rimozione delle parti in eccesso.

Tempo di attivazione 20 secondi.

### SET

› 6x5g Siringhe

### RICAMBI

› Siringa 5g

*The **Blue-Band** Cement offers optimum elastic properties without the need of being premixed. It allows an exact dose to apply directly to the band. The easy activation of the material reduces the working time. Excess flash can be easily cleaned up. The product's composition provides a better strength compared to conventional powder/liquid glass ionomer and zinc phosphate. Its fluoride releasing reduce the chance of decalcification. The blue color makes it easy to remove the cement excess.*

*Setting working time 20 seconds.*

### SET

› 6 x 5 g Syringes

### REFILLS

› Syringe 5g

### REF

FC-BOND-038

### REF

FC-BOND-050

## BOND-008

COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZANTE - *LIGHT CURE ADHESIVE*



### SET

- › 4x5 g Siringhe
- › 2x3 ml di resina
- › mordenzante da 7 ml
- › vaschetta e pennelli per miscelazione

### RICAMBI

- › Siringa 5g
- › Resina 1x3 ml
- › Mordenzante 7 ml

Tempi indicativi di polimerizzazione sono 20 secondi utilizzando una lampada a led.

### SET

- › 4 x 5 g Syringes
- › 2x3 ml of resin
- › 7ml of etchant bottle
- › tray and brushes

### REFILLS

- › Syringe 5g
- › Resin 1x3 ml
- › Etchant 7 ml

*Polymerization: 20 seconds working time using a led lamp.*

### REF

FC-BOND-008

### REF

FC-BOND-017  
FC-BOND-019  
FC-BOND-030