


RAPID OPEN BITE CORRECTION (ROC)


TS^{*}₂

Questo prodotto innovativo è stato **progettato dal Dr. John Voudouris (Toronto University e New York University).**

Con TS2 il morso aperto viene risolto in meno di 4-6 mesi con l'utilizzo congiunto di elastici intraorali leggeri. TS2 è posizionato sul lato linguale da 3-3 superiore e/o da 3-3 inferiore, per cui è totalmente invisibile. Le leggere protrusioni agiscono come efficaci sistemi educativi della lingua per prevenirne il suo posizionamento anteriore, mentre gli ampi sottosquadri consentono l'utilizzo di elastici intraorali per la correzione del cross bite. Completamente invisibile, TS2 è anche ben tollerato dai pazienti per il suo elevato comfort ed i ridotti tempi del trattamento.

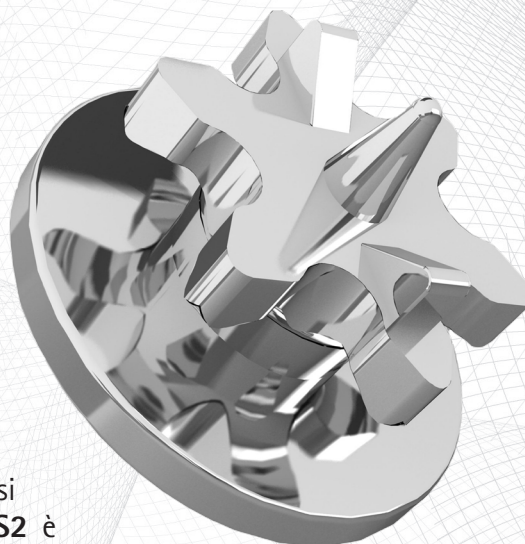


1. Le 9 protrusioni preven-
gono la spinta della
lingua sui denti anteriori
(TS2 non taglia la lingua,
i guanti dell'operatore o
la pelle)

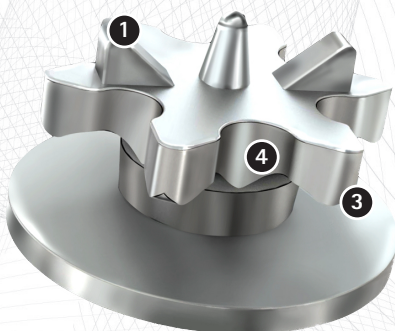

3. Sei sottosquadri da utilizzare
con elastici per morso crociato,
nel trattamento del morso
aperto laterale che general-
mente richiede l'espansione
mascellare

2. Basetta con una retina
da 80 mesh per una più
maggiore resistenza
ritentiva

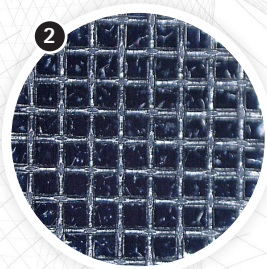

4. Inibitore per la lingua
dalle dimensioni molto
contenute per una buona
igiene orale

CODICE

CONFEZIONE

N30-TS2B

12 PZ.

