



ZIP



JET LP



IDEAL

TUBI BUCCALI
BUCCAL TUBES

La Sia Orthodontic Manufacturer offre un'ampia scelta di tubi realizzati con la tecnologia MIM, in acciaio inox 17-4. Ogni prodotto consente un corretto controllo dei movimenti dentari, semplicità di utilizzo e confort per il paziente.

La nuova forma del gancio integrato, assicura una maggiore resistenza e facilità nell'ingaggio degli elastici, mentre l'ampio invito dello slot agevola l'inserimento dell'arco, anche quando posizionato sul secondo molare.

TUBI DA PUNTARE. Sono realizzati con le flange per la saldatura integrate nel corpo del tubo, per una maggiore resistenza; alle estremità, inoltre, sono stati realizzati degli inviti per facilitare l'individuazione del punto di saldatura. La diminuzione dello spessore in queste aree, rende più solida la saldatura in quanto avvicina lo spessore della flangia a quello della banda, migliorando la trasmissione di corrente nel processo di saldatura.

TUBI DIRETTI. Sono dotati di una base larga, con retina da 80 maglie, per aumentare la base di adesione e migliorare la forza ritentiva. La basetta ha un indente per facilitare il corretto posizionamento tra le cuspidi e aumentare l'adesione del tubo alla superficie del dente.

Le basette dei tubi per il II° molare sono provvisti di una basetta, sono di dimensioni ridotte per agevolare il posizionamento quando lo spazio disponibile è contenuto.



Sia Orthodontic Manufacturer offers a wide range of MIM convertible and non-convertible, self-ligating, and conventional buccal tubes, all made of stainless steel 17-4. This product is easy to use, allows predictable teeth movement, and provides excellent patient comfort. The hook ensures a high resistance and easy insertion of the elastics. The funnel design offers a better and faster introduction of the arch even when the tube is on the second molar.

WELDABLE TUBES. *Welding flanges integrated into the tube's body grant excellent strength. The grooves at the flanges' edges help detect the correct welding position. The thickness of these parts is close to the band's, making the weld stronger because of the improved power transmission in the tack-welding process.*

BONDABLE BUCCAL TUBES. *Bondable tubes are equipped with an extended 80 gauge mesh base for outstanding retention. The indent is designed to facilitate the correct tube positioning and improve its adhesion to the tooth surface*

The bondable bases of the 2nd molar have reduced dimensions to facilitate the positioning when the space is limited.

Mesh Base

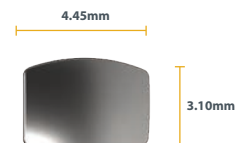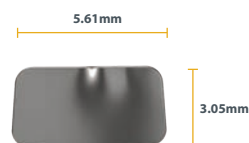

CONFEZIONE DA 10 PEZZI

PACKAGING OF 10 PCS



ZIP

Zip T6 e T7 sono tubi self-ligating diretti, per I° e II° molare, che combinano i vantaggi dei tubi convertibili con le meccaniche di scivolamento dei non convertibili. La realizzazione della clip in Nickel-Titanio assicura il trasferimento di forze costanti sull'arco. Inoltre, la memoria di forma del Nickel-Titanio previene rotture accidentali.

Facili da usare, Zip T6 e T7 trovano applicazione sia con bracket self-ligating che convenzionali.

Zip T6 and T7 are bondable self-ligating tubes for 1st and 2nd molars, which combine the convertible tubes' advantages with the sliding mechanics of non-convertibles. The nickel-titanium clip ensures the delivery of constant forces on the arch; also, the shape memory of the Nickel-Titanium prevents accidental breakage. Easy to use, Zip T6 and T7 work with both self-ligating and conventional brackets.



JET LP

JET Low Profile è il nuovo benchmark in campo ortodontico. La sua forma compatta combina un profilo estremamente basso con un ingresso dello slot ad imbuto molto ampio. Ergonomia, facilità di utilizzo e confort per il paziente rendono questa linea la Best in Class nella sua categoria.

Prodotto interamente in MIM, è disponibile per I° e II° molare nelle principali prescrizioni.

JET Low Profile is the new benchmark in the orthodontic field. Its compact shape combines a low profile with an extremely wide funnel slot entrance. Ergonomics, ease of use, and patient comfort make this line the Best in Class in its category.

Entirely manufactured in MIM, it is available for 1st and 2nd molars in the main prescriptions.






IDEAL

I tubi MIM della gamma Ideal, con una linea moderna ed accattivante, sono disponibili sia convertibili che non convertibili, diretti e da saldare, nelle principali prescrizioni. Il gancio integrato ha una linea che limita le interferenze con la gengiva per un comfort del paziente senza compromettere l'ingaggio degli elastici. La forma svasata dell'ingresso dello slot facilita l'inserimento dell'arco anche per il II° molare. Nella versione da saldare la flangia della base ha appositi inviti che, migliorando la trasmissione della corrente, incrementano la resistenza della saldatura.

With a modern and captivating design, the Ideal range's MIM tubes are available both convertible and non-convertible, bondable and weldable, in the main prescriptions. The integrated hook design reduces interference with the gum for better patient comfort without compromising the elastics' engagement. The flared shape of the slot entrance facilitates the arch's insertion also for the 2nd molar. In the weldable version, the base's flange has special indents that improve the power transmission improving the weld's strength.

Zip T6

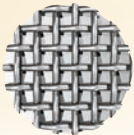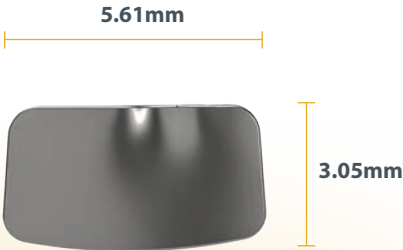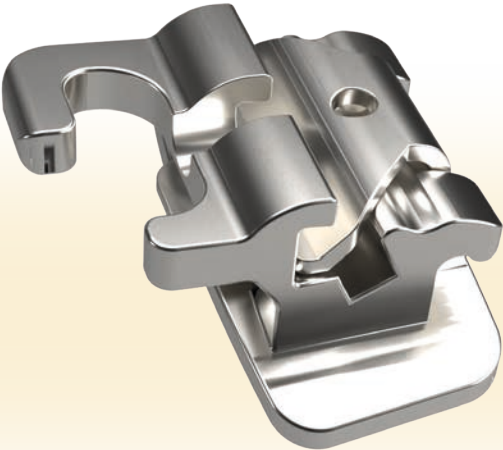

Mesh Base

1° MOLARE - 1st MOLAR



MD	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,6mm	-10°	+8°	UR	SLB30-1116DH	SLB30-1116VH	ROTH
			UL	SLB30-1126DH	SLB30-1126VH	ROTH
3,6mm	-25°	+5°	LR	SLB30-1146DH	SLB30-1146VH	ROTH
			LL	SLB30-1136DH	SLB30-1136VH	ROTH
3,6mm	-14°	+10°	UR		SLB30-1616VH	MBT
			UL		SLB30-1626VH	MBT
3,6mm	-20°	0°	LR		SLB30-1646VH	MBT
			LL		SLB30-1636VH	MBT



Zip T7

2° MOLARE - 2nd MOLAR



MD	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3mm	-10°	0°	UR	SLB30-1117DH	SLB30-1117VH	ROTH
			UL	SLB30-1127DH	SLB30-1127VH	ROTH
3mm	-25°	0°	LR	SLB30-1147DH	SLB30-1147VH	ROTH
			LL	SLB30-1137DH	SLB30-1137VH	ROTH
3mm	-14°	0°	UR		SLB30-1617VH	MBT
			UL		SLB30-1627VH	MBT
3mm	-10°	0°	LR		SLB30-1647VH	MBT
			LL		SLB30-1637VH	MBT

JET LP

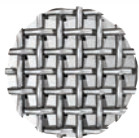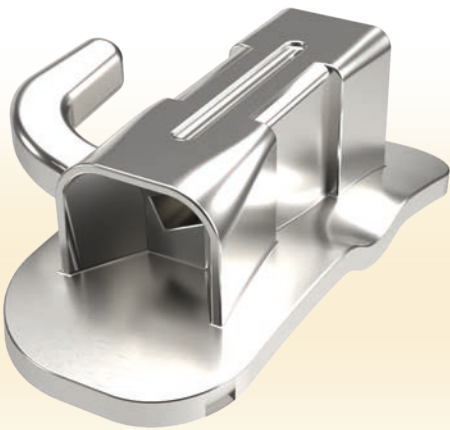


Mesh Base

4.45mm



2nd MOLAR

6.9mm

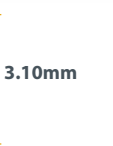

1st MOLAR



3mm

1° MOLARE - 1st MOLAR




MD	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
4,5mm	-10°	+8°	UR	26SN-1116DH-I	26SN-1116VH-I	ROTH
			UL	26SN-1126DH-I	26SN-1126VH-I	ROTH
4,5mm	-25°	+5°	LR	27SN-1146DH-I	27SN-1146VH-I	ROTH
			LL	27SN-1136DH-I	27SN-1136VH-I	ROTH
4,5mm	-14°	+10°	UR		26SN-1616VH-I	MBT
			UL		26SN-1626VH-I	MBT
4,5mm	-20°	0°	LR		28SN-1646VH-I	MBT
			LL		28SN-1636VH-I	MBT
4,5mm	0°	0°	UR/LL	25SN-0016DH-I	25SN-0016VH-I	EDGEWISE
			UL/LR	25SN-0026DH-I	25SN-0026VH-I	EDGEWISE

2° MOLARE - 2nd MOLAR





MD	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
2,9 mm	-10°	0°	UR	26SN-1117DH	26SN-1117VH	ROTH
			UL	26SN-1127DH	26SN-1127VH	ROTH
2,9 mm	-25°	0°	LR	27SN-1147DH	27SN-1147VH	ROTH
			LL	27SN-1137DH	27SN-1137VH	ROTH
2,9 mm	-14°	0°	UR		26SN-1617VH	MBT
			UL		26SN-1627VH	MBT
2,9 mm	-10°	0°	LR		27SN-1647VH	MBT
			LL		27SN-1637VH	MBT
2,9 mm	0°	0°	UR/LL	25SN-0017DH	25SN-0017VH	EDGEWISE
			UL/LR	25SN-0027DH	25SN-0027VH	EDGEWISE

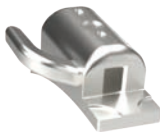TUBI DIRETTI BONDABLE TUBES		TUBI DA SALDARE WELDABLE TUBES
	SINGOLO NON CONVERTIBILE <i>SINGLE NON CONVERTIBLE</i>	
	ATTACCO GEMELLARE <i>TWIN BRACKET</i>	
	ATTACCO GEMELLARE CONVERTIBILE <i>CONVERTIBLE TWIN BRACKET</i>	
	SINGOLO CONVERTIBILE <i>SINGLE CONVERTIBLE</i>	
	DOPPIO NON CONVERTIBILE <i>NON CONVERTIBLE DOUBLE</i>	
	DOPPIO CONVERTIBILE <i>CONVERTIBLE DOUBLE TUBE</i>	
	TRIPLO NON CONVERTIBILE <i>NON CONVERTIBLE TRIPLE</i>	
	TRIPLO CONVERTIBILE <i>CONVERTIBLE TRIPLE</i>	

IDEAL

Bondable

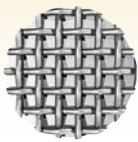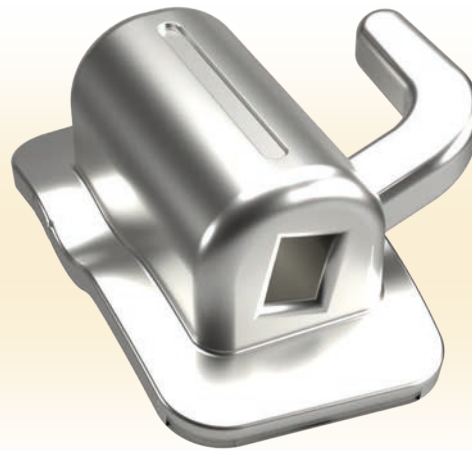

Mesh Base

NON CONVERTIBILI ~ *NON CONVERTIBLE*

	SUPERIORE ~ UPPER		INFERIORE ~ LOWER	
TUBO	TORQUE	DISTAL OFFSET	TORQUE	DISTAL OFFSET
Singolo	0	0	0	0
<i>Single</i>	-10	+8	-25	+5
	-14	+10	-10	0
			-20	0
Doppio con HG occlusale	0	0	0	0
<i>Double Occlusal HG</i>	-10	+8		
Doppio con HG gengivale	0	0	0	0
<i>Double Gingival HG</i>	-10	+8	-25	+5
Triplo	0	0		
<i>Triple</i>				
Bracket per il 6°	0	0	0	0

CONVERTIBILI ~ CONVERTIBLE

SUPERIORE ~ UPPER			INFERIORE ~ LOWER	
TUBO	TORQUE	DISTAL OFFSET	TORQUE	DISTAL OFFSET
SINGOLO	0	0	0	0
			-25	+5
<i>Single</i>	-10	+8	-20	0
Doppio con HG occlusale	-10	+8		
<i>Double Occlusal HG</i>				
Doppio con HG gengivale	-14	+10	-25	+5
<i>Double with gingival HG</i>				
Doppio con ausiliario rettangolare			-25	+5
<i>Double with Rectangular Auxiliar</i>			-20	0
Triplo	-10	+8		
<i>Triple</i>	-14	+10		
Bracket per il 6°	0	0	0	0

SINGOLO NON CONVERTIBILE - *SINGLE NON CONVERTIBLE*

M/D	TORQUE D/O		QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	5SN-0016DH-I	5SN-0016VH-I	EDGEWISE
			UL/LR	5SN-0026DH-I	5SN-0026VH-I	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°	UR	6SN-1116DH-I	6SN-1116VH-I	ROTH
			UL	6SN-1126DH-I	6SN-1126VH-I	ROTH
3,7	-25°	+5°	LR	7SN-1146DH-I	7SN-1146VH-I	ROTH
			LL	7SN-1136DH-I	7SN-1136VH-I	ROTH
3,7	-14°	+10°	UR		6SN-1617VH-I	MBT
			UL		6SN-1627VH-I	MBT
3,7	-10°	0°	LR		7SN-1647VH-I	MBT
			LL		7SN-1637VH-I	MBT
3,7	-20°	0°	LR		8SN-1646VH-I	MBT
			LL		8SN-1636VH-I	MBT

ATTACCO GEMELLARE - *TWIN BRACKET*

M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	5SN-0016DW	5SN-0016VW	EDGEWISE
3,7	0°	0°	UL/LR	5SN-0026DW	5SN-0026VW	EDGEWISE

ATTACCO GEMELLARE CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE TWIN BRACKET*

M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	5SC-0016DW	5SC-0016VW	EDGEWISE
3,7	0°	0°	UL/LR	5SC-0026DW	5SC-0026VW	EDGEWISE

SINGOLO CONVERTIBILE - *SINGLE CONVERTIBLE*

M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL		5SC-0016VH-I	EDGEWISE
			UL/LR		5SC-0026VH-I	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°	UR	6SC-1116DH-I	6SC-1116VH-I	ROTH
			UL	6SC-1126DH-I	6SC-1126VH-I	ROTH
3,7	-25°	+5°	LR	7SC-1146DH-I	7SC-1146VH-I	ROTH
			LL	7SC-1136DH-I	7SC-1136VH-I	ROTH
3,7	-20°	0°	LR		8SC-1646VH-I	MBT
			LL		8SC-1636VH-I	MBT

DOPPIO NON CONVERTIBILE - *NON CONVERTIBLE DOUBLE*

M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	0.045" OCCLUSAL	UR/LL	5DN-0016DH-I0	5DN-0016VH-I0	EDGEWISE
				UL/LR	5DN-0026DH-I0	5DN-0026VH-I0	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°		UR	6DN-1116DH-I0	6DN-1116VH-I0	ROTH
				UL	6DN-1126DH-I0	6DN-1126VH-I0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	0.045” GINGIVAL	UR/LL	5DN-0016DH-I	5DN-0016VH-I	EDGEWISE
				UL/LR	5DN-0026DH-I	5DN-0026VH-I	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°		UR	6DN-1116DH-I	6DN-1116VH-I	ROTH
				UL	6DN-1126DH-I	6DN-1126VH-I	ROTH
3,7	-25°	+5°		LR	7DN-1146DH-I	7DN-1146VH-I	ROTH
				LL	7DN-1136DH-I	7DN-1136VH-I	ROTH



M/D	TORQUE	D/O		QUADRANT	SLOT 0.018		PRESCR.
3,7	0°	0°	CENTRAL HOOK	UR/LL	5DN-2016DH-I0		RICKETTS
				UL/LR	5DN-2026DH-I0		RICKETTS



M/D	TORQUE	D/O		QUADRANT	SLOT 0.018		PRESCR.
3,7	0°	0°		UR/LL	5DN-2016DH-I		RICKETTS
				UL/LR	5DN-2026DH-I		RICKETTS

DOPPIO CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE DOUBLE*

M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-10°	+8°	0.045" OCCLUSAL	UR	6DC-1116DH-I0	6DC-1116VH-I0	ROTH
				UL	6DC-1126DH-I0	6DC-1126VH-I0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-14°	+10°	0.045" GINGIVAL	UR		6DC-1616VH-I	MBT
				UL		6DC-1626VH-I	MBT
3,7	-25°	+5°		LR	7DC-1146DH-I0	7DC-1146VH-I0	ROTH
				LL	7DC-1136DH-I0	7DC-1136VH-I0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-25°	+5°	0.018"x0.025"	LR	7DC-1146DH-I	7DC-1146VH-I	ROTH
				LL	7DC-1136DH-I	7DC-1136VH-I	ROTH
3,7	-20°	0°		LR		8DC-1646VH-I	MBT
				LL		8DC-1636VH-I	MBT

TRIPLO NON CONVERTIBILE - *NON CONVERTIBLE TRIPLE*



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	5TN-2016DH-I	RICKETTS/EDG.
			UL/LR	5TN-2026DH-I	RICKETTS/EDG.

TRIPLO CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE TRIPLE*



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-10°	+8°	0.018"x0.025" H.G. 0.045"	UR	6TC-1116DH-I0	6TC-1116VH-I0	ROTH
				UL	6TC-1126DH-I0	6TC-1126VH-I0	ROTH
3,7	-14°	+10°		UR		6TC-1616VH-I0	MBT
				UL		6TC-1626VH-I0	MBT




think different


i-liner è il sistema di allineatori per un'ortodonzia completamente invisibile. i-liner è perfettamente trasparente e confortevole, mentre il workflow è organizzato su una piattaforma web intuitiva e semplice.

i-liner is our aligners system for a full aesthetic treatment. Uniquely clear, excellent fit and easy-to-use web-based workflow, to simplify your daily routine.

www.i-liner.it • info@i-liner.it

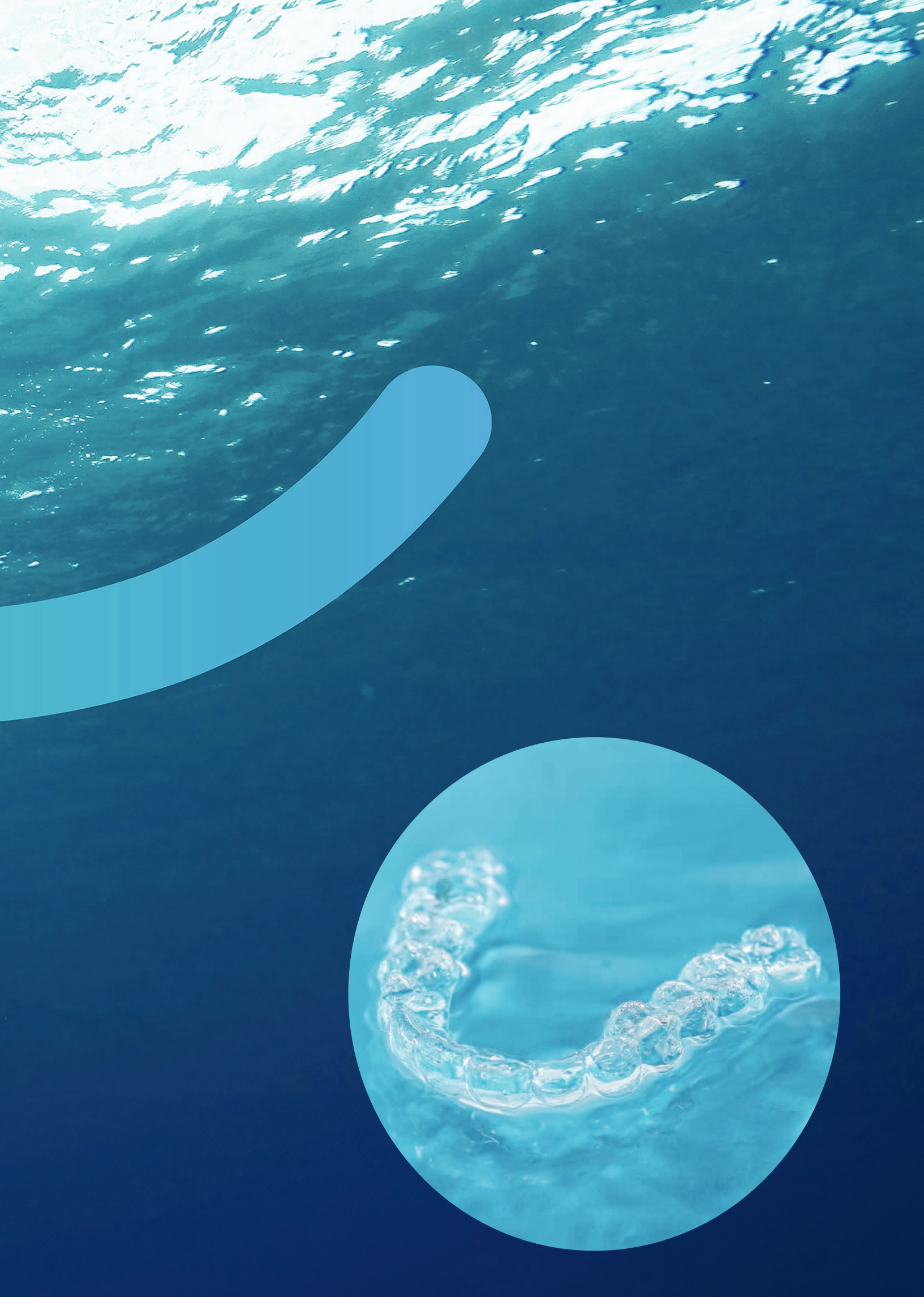

IDEAL

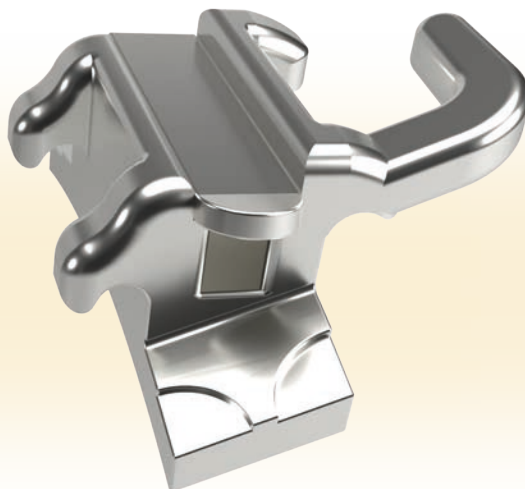

TUBI DA PUNTARE. Sono realizzati con le flange per la saldatura integrate nel corpo del tubo, per una maggiore resistenza; alle estremità, inoltre, sono stati realizzati degli inviti per facilitare l'individuazione del punto di saldatura. La diminuzione dello spessore in queste aree, rende più solida la saldatura in quanto avvicina lo spessore della flangia a quello della banda, migliorando la trasmissione di corrente nel processo di saldatura.



La posizione del gancio e le superfici arrotondate del tubo, minimizzano i disagi per il paziente quando entrano in contatto con le mucose.

La forma svasata dello slot rende più agevole l'inserimento dell'arco.


WELDABLE TUBES. *Welding flanges are integrated into the tube's body for excellent strength. The grooves at the edges of the flanges help in detecting the correct welding position. The thickness of these parts is close to the band's making the weld stronger because of the improved power transmission in the tack welding process.*

Hook position and the rounded surfaces of the tube minimize the discomfort for the patient when they come into contact with the mucous membranes. Easy wire insertion thanks to the funneled slot's shape.

POSIZIONE STANDARD DEL TUBO ~ *STANDARD TUBE POSITION*

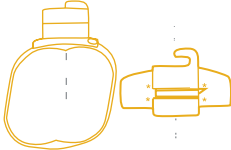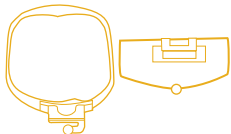	posizione occluso-gengivale <i>occlusal-gingival position</i>	posizione mesio-distale <i>mesial-distal position</i>
arcata superiore ~ <i>upper</i>		
arcata inferiore ~ <i>lower</i>		

SINGOLO PER LIP BUMPER 0.045" - *0.045" LIP BUMPER SINGLE TUBE*

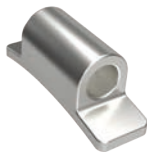

M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	REF
3,7	0°	0°	UNIV.	0SN-0016WW

ATTACCO GEMELLARE - *TWIN BRACKET*



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022
3,7	0°	0°	UNIV.	0SN-0016DW	0SN-0016VW

ATTACCO GEMELLARE CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE TWIN BRACKET*



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022
3,7	0°	0°	UNIV.	0SC-0016DW	0SC-0016VW

SINGOLO NON CONVERTIBILE - *SINGLE NON CONVERTIBLE*

Upper



Lower



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	0SN-0016DH	0SN-0016VH	EDGEWISE
			UL/LR	0SN-0026DH	0SN-0026VH	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°	UR	1SN-1116DH	1SN-1116VH	ROTH
			UL	1SN-1126DH	1SN-1126VH	ROTH
3,7	-25°	+5°	LR	2SN-1146DH	2SN-1146VH	ROTH
			LL	2SN-1136DH	2SN-1136VH	ROTH
3,7	-14°	+10°	UR		1SN-1617VH	MBT
			UL		1SN-1627VH	MBT
3,7	-10°	0°	LR		2SN-1647VH	MBT
			LL		2SN-1637VH	MBT
3,7	-20°	0°	LR		3SN-1646VH	MBT
			LL		3SN-1636VH	MBT

SINGOLO CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE SINGLE*

Upper



Lower



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL		0SC-0016VH	EDGEWISE
			UL/LR		0SC-0026VH	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°	UR	1SC-1116DH	1SC-1116VH	ROTH
			UL	1SC-1126DH	1SC-1126VH	ROTH
3,7	-25°	+5°	LR	2SC-1146DH	2SC-1146VH	ROTH
			LL	2SC-1136DH	2SC-1136VH	ROTH
3,7	-20°	0°	LR		3SC-1646VH	MBT
			LL		3SC-1636VH	MBT

DOPPIO NON CONVERTIBILE - **NON CONVERTIBLE DOUBLE**

M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	0.045" OCCLUSAL	UR/LL	ODN-0016DH-0	ODN-0016VH-0	EDGEWISE
				UL/LR	ODN-0026DH-0	ODN-0026VH-0	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°		UR	1DN-1116DH-0	1DN-1116VH-0	ROTH
				UL	1DN-1126DH-0	1DN-1126VH-0	ROTH



Upper



Lower



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	0°	0°	0.045” GINGIVAL	UR/LL	ODN-0016DH	ODN-0016VH	EDGEWISE
				UL/LR	ODN-0026DH	ODN-0026VH	EDGEWISE
3,7	-10°	+8°		UR	1DN-1116DH	1DN-1116VH	ROTH
				UL	1DN-1126DH	1DN-1126VH	ROTH
3,7	-25°	+5°		LR	2DN-1146DH	2DN-1146VH	ROTH
				LL	2DN-1136DH	2DN-1136VH	ROTH



M/D	TORQUE	D/O		QUADRANT	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7	0°	0°	CENTRAL HOOK	UR/LL	ODN-2016DH-0	RICKETTS
				UL/LR	ODN-2026DH-0	RICKETTS



M/D	TORQUE	D/O		QUADRANT	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7	0°	0°		UR/LL	ODN-2016DH	RICKETTS
				UL/LR	ODN-2026DH	RICKETTS

DOPPIO CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE DOUBLE*



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-10°	+8°	0.045" OCCLUSAL	UR	1DC-1116DH-0	1DC-1116VH-0	ROTH
				UL	1DC-1126DH-0	1DC-1126VH-0	ROTH



Upper



Lower



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-14°	+10°	0.045" GINGIVAL	UR		1DC-1616VH	MBT
				UL		1DC-1626VH	MBT
3,7	-25°	+5°		LR	2DC-1146DH-0	2DC-1146VH-0	ROTH
				LL	2DC-1136DH-0	2DC-1136VH-0	ROTH



Lower



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-25°	+5°	0.018"x 0.025"	LR	2DC-1146DH	2DC-1146VH	ROTH
				LL	2DC-1136DH	2DC-1136VH	ROTH
3,7	-20°	LR			3DC-1646VH	MBT	
		LL			3DC-1636VH	MBT	

TRIPLO NON CONVERTIBILE - *NON CONVERTIBLE TRIPLE*



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANT	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7	0°	0°	UR/LL	OTN-2016DH	RICKETTS/EDG.
			UL/LR	OTN-2026DH	RICKETTS/EDG.

TRIPLO CONVERTIBILE - *CONVERTIBLE TRIPLE*



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX	QUADRANT	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7	-10°	+8°	0.018"x0.025" H.G. 0.045"	UR	1TC-1116DH-0	1TC-1116VH-0	ROTH
				UL	1TC-1126DH-0	1TC-1126VH-0	ROTH
3,7	-14°	+10°		UR		1TC-1616VH-0	MBT
				UL		1TC-1626VH-0	MBT